

Cod. Art. :  
AP1185



## Poltrona prelievi elettrica ad altezza variabile

### STRUTTURA

Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica, chimica e alla corrosione, lo schienale ha una struttura metallica, mentre il sedile e il poggiatesta hanno un supporto in multistrato di conifere, resistente all'umidità.

### SCHIENALE - SEDILE - IMBOTTITURA DI GAMBA

La tappezzeria delle tre sezioni è modellata in poliuretano integrale schiumato a freddo, ignifugo, che consente al paziente il massimo comfort per prevenire il decubito. Lo schienale è dotato di una maniglia di spinta.

### MOVIMENTI

Lo schienale, il poggiatesta e il meccanismo di sollevamento sono indipendenti, azionati da ATTUATORI ELETTRICI DEWERT 24 V.

Tutto controllato da un comando manuale a bassa tensione, dotato di cavo a spirale.

La posizione di trendelenburg è ottenuta per mezzo di una molla a gas ; la leva di comando è situata sulla parte posteriore dello schienale.

### BRACCIOLI

Imbottito e rivestito in tessuto morbido; regolabile, grazie ad un morsetto speciale, in altezza, inclinazione, rotazione ed estensione.

## SEMINTERRATO

Le coperture di base e schienale dello schienale, della seduta e del poggiamambe sono realizzate in ABS termoformato per facilitare le operazioni di pulizia.

Completa di poggipiedi girevoli con sistema di frenatura automatico per la discesa del paziente. Alla base ci sono 4 ruote girevoli e piroettanti, 2 delle quali (posteriori) con freno simultaneo e 1 direzionale.

Tutti i materiali utilizzati sono trattati con additivo antibatterico BIOMASTER.

## DATI TECNICI

Dimensioni di ingombro (posizione seduta): 750x950x1230 h mm

Dimensioni di ingombro (posizione orizzontale): 750x1745x530 h mm

Larghezza del sedile: 540 mm

Altezza minima del sedile: 530 mm

Altezza massima del sedile: 840 mm

Regolazione dello schienale: 105 ° / 178 °

Regolazione del bracciolo: -90 ° / 6 °

Regolazione Trendelenburg: 0 ° / -15 °

Ruote: diam. 125 mm

Capacità: 150 Kg

Peso: 70 Kg

## Accessori:



**MZ1048**-PORTAROTOLO PER POLTRONE MR1... E AP1... AP4300



**MZ5149**-ASTA FLEBO AD H VARIABILE PER MORSETTI MZ5163/4 -  
POLTRONE H FISSA ED H VARIABILE



**MZ5163**-MORSETTO DX PER ASTA FLEBO MZ5149




**MZ5164**-MORSETTO SX PER ASTA FLEBO MZ5149



**MZ1058**-POGGIATESTA CONTENITIVO PER POLTRONE RELAX MR1... -  
IN TINTA CON LA POLTRONA - REGOLABILE IN ALTEZZA



**MZ1059**-POGGIATESTA CONTENITIVO PER POLTRONE RELAX MR1... -  
MONOCOLORE GRIGIO - REGOLABILE IN ALTEZZA

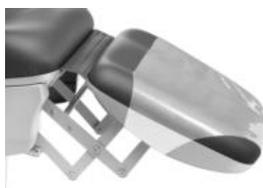

**AP4292**-CUFFIA DI PROTEZIONE IN MATERIALE PLASTICO PER  
GAMBALE MR1... / AP1...