


# Injector Plus

Iniettore uterino per isterosalpingografia  
*Hysterosalpingography uterine injector*

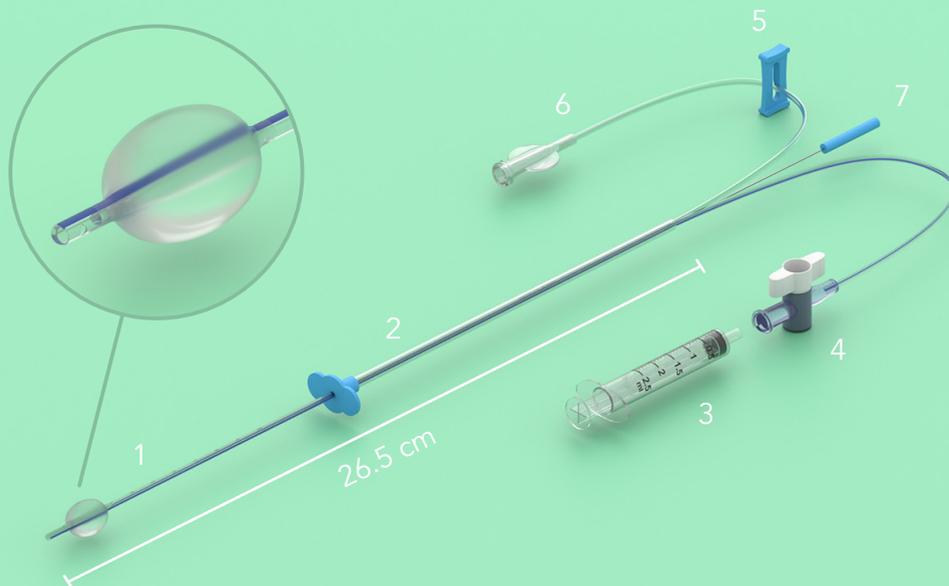

 Per l'iniezione di mezzi di contrasto (radiopaco / blu di metilene) nelle procedure di isterosalpingografia. Sono costituiti da:

- un introduttore rigido dotato di fermo scorrevole (2);
- un catetere semirigido radiopaco a 2 lumi (1) dotato di un palloncino ovale in gomma termoplastica da 2,5 cc sulla parte distale che assicura un alloggiamento stabile del catetere;
- rubinetto (4) per regolare il gonfiaggio del palloncino;
- clamp stringitubo per evitare il reflusso di liquido (5);
- un raccordo luer lock femmina (6) per l'iniezione del mezzo di contrasto;
- una siringa da 2,5 cc (3);
- mandrino (7) per un inserimento agevolato.

 To inject contrast media (radio-opaque / methylene blue) in hysterosalpingography diagnostic procedure.

- The catheters are composed by:
- rigid introducer provided with a mobile positioner (2);
  - double lumen radiopaque semirigid catheter (1) with a thermoplastic rubber oval balloon of 2.5 cc on the distal tip, that ensures a firm positioning of the catheter;
  - stopcock (4) to regulate balloon inflation;
  - tubing clamp to avoid the liquid backflow (5);
  - female luer-lock connector (6) for contrast media injection;
  - a 2.5 cc syringe (3);
  - the mandrel (7) allows easier insertion.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720226	Ø esterno 2 mm (6 Fr) O.D 2 mm (6 Fr)	10 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

