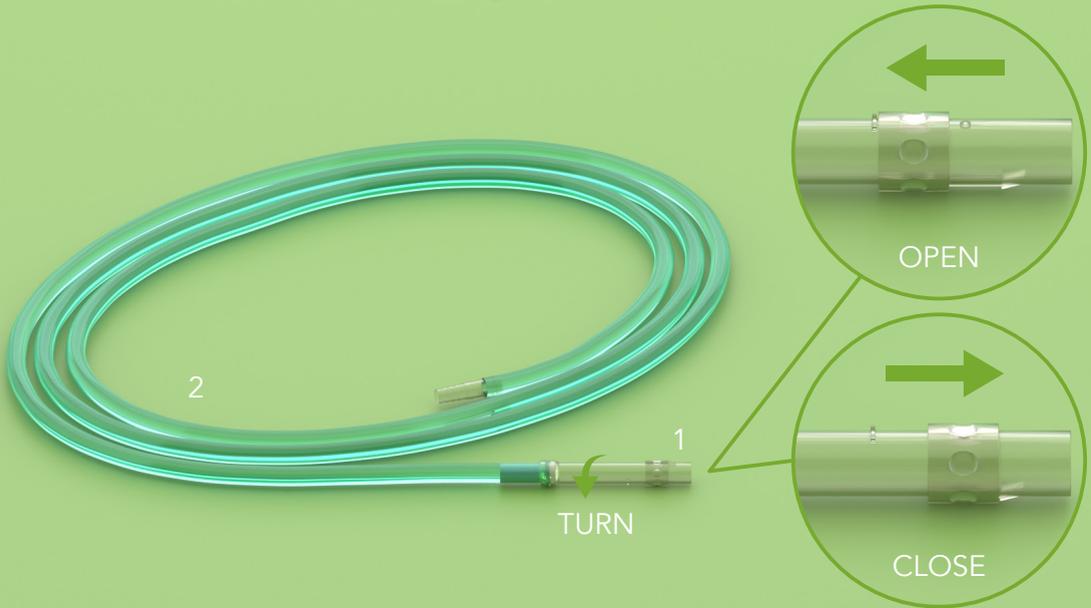


Rovac

Set tubo di aspirazione
Aspiration tubing setManipolo e adattatore, senza tubo
Handle and adapter, w/o tubing set

Manipolo Rovac

 Utilizzato nelle procedure di interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di aborto spontaneo. Il manipolo rotante (1) è connesso a un tubo di 2 metri (2) che termina con un adattatore per la pompa di aspirazione.

Il manipolo regola l'aspirazione grazie a una valvola di controllo azionabile con un dito.

Il manipolo può essere ruotato a 360° per un'evacuazione completa della cavità uterina evitando l'attorcigliamento del tubo.

La tacca sul manipolo indica il corretto orientamento della punta della curetta.

Lo spessore del tubo evita il rischio di collabire e la trasparenza rende visibile il materiale aspirato.

Compatibile con tutte le pompe di aspirazione.

 Used during voluntary pregnancy termination procedures or following miscarriage.

The rotating handle (1) is connected to a 2 meters tubing set (2) ending with a suction pump adapter.

Suction is regulated through a control valve that can be easily activated with one finger.


360° rotating handle allows a complete evacuation of the uterine cavity and prevents tubing twisting.

A reference mark placed on the handle indicates the exact orientation of the curette tip.

Tube thickness prevents any possible collapse and great transparency makes aspirated material visible.

It can be used with all suction pumps available on the market.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720133 sterile	Lunghezza 200 cm Ø esterno 15 mm - Ø interno 10 mm	20 pz. (confezionati singolarmente) 20 pcs. (individually packed)
720134 non sterile	Length 200 cm O.D. 15 mm - I.D. 10 mm	20 pz. (confezionati singolarmente) 20 pcs. (individually packed)
720041 sterile	Manipolo e adattatore, senza tubo	20 pz. (confezionati singolarmente) 20 pcs. (individually packed)
720941 non sterile	Handle and adapter, w/o tubing set	Prodotto sfuso, ord. min. 20 pz. Bulk, MOQ 20 pcs.

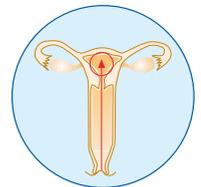

720133 - 720041: monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

720134 - 720941: monouso - non sterile - marcato CE

A richiesta è disponibile con tubo di 3 metri (codice 720143)

720133 - 720041: disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

720134 - 720941: disposable - non-sterile - CE marked

It is also available with a 3 meters tube upon request (code 720143)