




Ramister

Isterometro retto
Straight Hysterometer

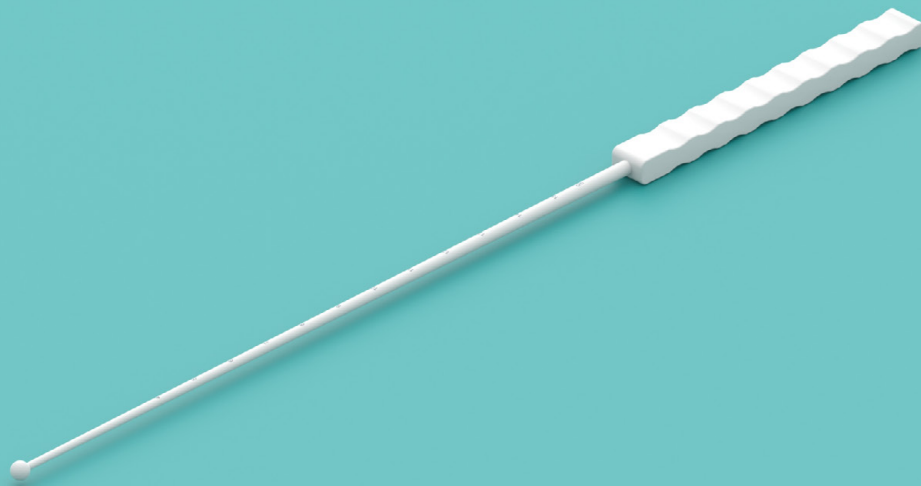

 • **Ramister:** Fornisce una misura approssimativa della profondità della cavità uterina. Dritto e graduato con scala da 4 a 15 cm (risoluzione 1 cm)*. Leggermente conico di diametro da 3 mm a 5 mm. La punta arrotondata permette un inserimento confortevole attraverso la cervice uterina. La malleabilità del materiale consente la curvatura manuale a seconda della necessità.

* Fornisce una misura approssimativa.

 • **Ramister:** It provides an approximate measure of the depth of the uterus. Straight and graduated, ranging from 4 to 15 cm (1 cm resolution)*. Slightly conical (3 to 5 mm o.d.). The rounded tip allows a comfortable insertion through the cervical canal. Its malleable plastic grants manual bending of the instrument where necessary.

* It gives an approximate measurement.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720108	Lunghezza 24,5 cm Length 24.5 cm	150 pz./pcs. *

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

*Disponibile in scatole da 50 pezzi su richiesta

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

*Available in boxes of 50 pcs upon request

